

Spesialtilpasset ROHO® AGILITY® ryggpute supplementet

Leverandør: Disse instruksjonene må gis til brukeren av dette produktet.

Bruker (bruker eller pleier): Les instruksjonene før bruk, og oppbevar dem til fremtidig bruk.



Dette dokumentet er gitt som et supplement til produktinformasjonen som følger med ROHO AGILITY Ryggsystem og ROHO AGILITY Ryggsystem Maskinvarer, som inkluderer:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - DELEDETALJER OG PRODUKTSPEKIFIKASJONER | - SNU RYGGSKALLET |
| - INNSTALLASJON AV RYGGSKALLMASKINVARE | - FJERNING OG MONTERING AV TREKK |
| - MONTERING OG FJERNING AV RYGGBESLAG PÅ BAKSTOLPEN | - FJERNING OG MONTERING AV TREKK-KOMPONENTER |
| - MONTERING OG FJERNING AV AGILITY | - TILBEHØR |
| - HØYDEILPASNING OG SETEDYBDE OG VINKELJUSTERING | - PROBLEMLØSING, VEDLIKEHOLD, DESTRUERING, RENGJØRING OG DESINFISERING |
| - BEGRENSET GARANTI: RYGGPLATE, BESLAG TIL RYGGPLATE OG RYGGRØRBESLAG | |

Den tilpassede ROHO® AGILITY® ryggputen (Custom AGILITY Ryggpute) er et skreddersydd produkt designet for å møte pasientens spesifikke behov. Den foreskrivende legen bør kontaktes for spørsmål om den fullstendige tiltenkte bruken av dette tilpassede produktet.

Produktspesifikasjoner

Materialer: neoprengummi, uten latex, forniklet messing, ventil, polyetylenkum



Sikkerhetsinformasjon



Forsiktig: Langvarig eksponering for ozon kan svekke materialer som brukes i dette produktet, påvirke produktets ytelse og oppheve produktgarantien.

DRY FLOATATION® Luftceller : Justeringinstruksjoner

1. Plasser AGILITY-ryggputen på AGILITY-ryggplaten, med luftcellene vendt mot brukeren. Bruk borrelås-stripsene for å feste ryggputen til ryggplaten.
2. Åpne ventilen (A). Skyv gummislangens håndpumpe over ventilen. Blås opp til luftcellene begynner å bue seg litt. Klem sammen gummislangen på håndpumpen og lukk ventilen (B). Fjern håndpumpen. *(Gjenta denne prosessen på hver ventildel til alle cellene er oppblåst).*
3. Brukeren skal sitte i sin vanlige sitteposisjon. Kontroller at ryggputen er riktig plassert bak brukeren.
4. Juster luftmengden i cellene etter behov. Sørg for at det er minst ½ tomm (1,5 cm) med luft som støtter den brukerens benfremspring.
5. Kontroller at alle ventiler er lukket når justeringen er fullført.

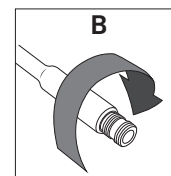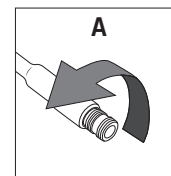

Advarsel: KONTROLLER LUFTMENGDEN! Sørg for at det er minst ½ tomm (1,5 cm) med luft som støtter den brukerens benfremspring. Følg terapeutens anbefalinger med hensyn til luftmengde.

DRY FLOATATION Luftceller : Rengjøring og desinfisering**IKKE:**

- vask eller tørk luftcellene i maskin
- bruk skuremidler som ståull eller skuresvamper
- bruk kaustiske vaskemidler beregnet til oppvaskmaskin
- bruk rengjøringsmidler som inneholder petroleum eller organiske løsemidler inkludert aceton, toluen, metyl etyl keton (MEK), NAFTA, rensemidler til klær eller limfjernere
- la vann eller rensemiddel å komme inn i produktet
- utsett produktet for ultrafiolett lys eller rensemetoder med ozongass
- bruk oljeholdige kremer, lanolin eller fenolholdige desinfeksjonsmidler

Rengjøre luftcellene: Ta luftcellene ut av trekket og skumputen, lukk ventilene og legg det ned i en stor vask. Vask for hånd med en mild flytende håndsåpe, håndoppvaskmiddel, vaskemiddel eller et universalt vaskemiddel (følg anvisningene på blekemiddel flasken). Skrubd forsiktig alle putens overflater med en myk plastbørste, svamp eller klut. Skyll godt med rent vann. Lufttørk. Må IKKE utsettes for direkte sollys.

Desinfisere luftcellene: Følg rengjøringsinstruksjonen over og bruk deretter 1 del flytende blekemiddel (klorin) per 9 deler vann. Hold produktet vått med blekemiddel i 10 minutter. Skyll godt med rent vann. Lufttørk. Merk: De fleste bakteriedrepende midlene er trygge hvis de brukes i henhold til produsentens blandingsforhold.

**Følg anvisninger på klorinflasken.**

Merknad om sterilisering: Høye temperaturer fremskynder aldri og skader produktets sammensetning. Produkter fra ROHO er ikke pakket i steril tilstand, og det er ikke ment at de skal steriliseres før bruk. Dersom regelverket krever sterilisering: Først følger du instruksjonene for rengjøring og desinfisering; deretter åpner du oppblåsningsventilen og bruker lavest mulig steriliseringstemperatur, men ikke mer enn 60 °C, i så kort tid som mulig. IKKE autoklaver.

Begrenset garanti

Begrenset garantiperiode fra den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet: DRY FLOATATION luftceller: 36 måneder; trekk og skumpute: 18 måneder. Se vedlegget ROHO Begrenset Garanti som medfølger produktet, eller kontakt kundeservice.

ROHO, Inc. har en policy om kontinuerlige produktforbedringer og forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet. En til enhver tid oppdatert versjon av dette dokumentet er tilgjengelig på ROHO.com.

© 2013, 2016 ROHO, Inc.

ROHO®, DRY FLOATATION® og AGILITY® er registrerte varemerker for ROHO, Inc.

Produktene i dette dokumentet kan være beskyttet av ett eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker. For ytterligere opplysninger henvises det til ROHO.com.



ROHO, Inc.

Administrasjonskontor:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

Post-/leveringsadresse:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundeservice: cc@roho.com

Utenfor USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com

ROHO.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Item # T20203, Revision: 6/20/16



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.