

Räättälöity ROHO® AGILITY® -selkätyyny liiteviikonen

Toimittaja/Jälleenmyyjä: Nämä ohjeet on luovutettava tuotteen käyttäjälle.

Käyttäjä (Potilas tai hoitaja): Ennen tuotteen käyttöä lue ohjeet ja talleta ne myöhempiä tarvetta varten.



Tämä asiakirja on täydennys tuotetietoihin, jotka on annettu ROHO AGILITY Back System -selkätukijärjestelmän ja ROHO AGILITY Back System -tarvikkeiden liitteenä. Tukijärjestelmä sisältää:

- | | |
|---|---|
| - OSAT JA TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT | - KÄÄNNÄ SELKÄNOJAN RUNKO |
| - SELKÄNOJAN RUNGON OSIEN ASENNUS | - PÄÄLLISEN IRROTTAMINEN JA ASENTAMINEN |
| - SELKÄNOJAN OSIEN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN | - PÄÄLLISEN OSIEN IRROTTAMINEN JA ASENTAMINEN |
| - AGILITY ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN | - LISÄVARUSTEET |
| - SYVYYDEN JA KULMAN SAATÖ JA ISTUIMEN SYVYYDEN JA KULMAN SÄÄTÖ | - ONGELMANRATKAISU, HUOLTO, HÄVITTÄMINEN, PUHDISTAMINEN JA DESINFIOINTI |
| - RAJOITETTU TAKUU: TAKAKUORI, TAKAKUOREN OSAT JA SELKÄNOJAN OSAT | |

Custom ROHO® AGILITY® -selkätyyny (Custom AGILITY Back Cushion) on räättälöity väline, joka on suunniteltu vastaamaan yksilön erityisiä tarpeita. Hoitavaan klinikkoon on otettava yhteyttä tämän räättälöidyn tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Tuotetiedot

Materiaali: neopreenikumi, valmistettu ilman lateksia, nikkelpinnoitettu messinki, täyttöventtiili, polyetyleenivaaho



Tuotteen turvallinen käyttö



Varoitus: Pitkittynyt altistuminen otsonille saattaa heikentää tässä tuotteessa käytettyjä materiaaleja, vaikuttaa sen toimintaan ja mitätöidä tuotteen takuun.

DRY FLOATATION®- ilmalla täytettävä kenno-osa : Säätöohjeet

1. Aseta Räättälöity AGILITY-selkätyyny AGILITY-takakuoreen niin, että ilmakehnot tulevat käyttäjää kohden. Kiinnitä selkätyyny takakuoreen kiinnitysnauhojen avulla.
2. Avaa venttiili (A). Liu'uta käsipumpun suutin venttiilin päälle. Lisää ilmaa, kunnes ilmalla täytettävä kenno-osa alkaa kaareutua lievästi. Purista pumpun kumisuutinta sormilla ja sulje venttiili (B). Irrota pumpu. (Toista tämä prosessi jokaisen venttiilin osalta, kunnes koko ilmalla täytettävä kenno-osa on täytetty.)
3. Käyttäjän tulisi istua normaalissa avanomaisessa-asennossaan. Varmista, että selkätyyny on asetettu oikein käyttäjän taakse.
4. Säädä kenno-osan täyttöastetta tarpeen mukaan. Varmista, että vähintään 1,5 cm (½ in) ilmaa on tukemassa potilaan luu-ulokkeita.
5. Varmista, että kaikki venttiilit on suljettu, kun säätö on suoritettu.

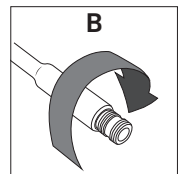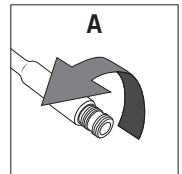

Varoitus: TARKISTA TÄYTYMINEN! Varmista, että vähintään 1,5 cm (½ in) ilmaa on tukemassa potilaan luu-ulokkeita. Noudata määräjän suosittamia täyttötasoja.

DRY FLOATATION®- ilmalla täytettävä kenno-osa : Puhdistus ja desinfiointi



ÄLÄ:

- konepese tai konekuivaa sisäosaa
- käytä hankaavia tuotteita tai aineita kuten teräsvillaa tai hankaavia puhdistustynyjä
- käytä syövyttäviä, astianpesukoneessa käytettäväksi tarkoitettuja puhdistusaineita
- käytä petroleumia tai orgaanisia liuottimia kuten asetonia, tolueenia, metyylietyyliketonia (MEK), maaöljyä, kuivapuhdistusnesteitä tai tuotteen pintaan kiinnittyviä liuotinaaineita sisältäviä puhdistustuotteita
- päästä tuotteen sisään vettä tai puhdistusainetta
- altista tuotetta otsonikaasu- tai ultravioletivalopuhdistusmenetelmille
- käytä öljypohjaisia voiteita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointiaineita

Sisäosan puhdistaminen: Irrota sisäosa päällisestä ja vaahtomuovitynnystä, sulje venttiili(t) ja aseta sisäkumi riittävän suureen pesualtaaseen. Käsi pesu miedolla nestesaippualla, käsitiskiaineella, pyykinpesuaineella tai yleispuhdistusaineella (noudata tuotteen käyttöohjeita). Hiero varovasti kaikki päällisen kohdat puhtaaksi käyttäen pehmeää muoviharjaa, sientä tai liinaa. Huuho huolellisesti puhtaalla vedellä. Ilma kuivatus. ÄLÄ altista suoralle auringonvalolle.

Sisäosan desinfiointi: Toista puhdistuksen vaiheet käyttäen 1 osa kotitalouskäyttöön tarkoitettua valkaisuainetta 9 osaan vettä. Pidä tuotetta valkaisuaineliuoksessa 10 minuuttia. Huuho huolellisesti puhtaalla vedellä. Ilma kuivatus. Huom: Useimmat bakteereja tappavat desinfiointiaineet ovat turvallisia, jos käytössä noudatetaan aineen valmistajan laimennusohjeita.



Noudata valkaisuainepakkauksen turvaohjeita.



Huomaa sterilointiin liittyen: Korkeat lämpötilat nopeuttavat ikääntymistä ja vaurioittavat tuotteen rakennetta. ROHO-tuotteet eivät ole steriilisti pakattuja, eikä niitä tarvitse steriloida ennen käyttöä. Jos laitoksen käytänteet vaativat sterilointia: Toimi ensin puhdistus ja desinfiointiohjeiden mukaisesti, avaa sitten täyttöventtiili ja käytä alhaisinta mahdollista sterilointilämpötilaa, joka ei saa ylittää 60°C, sekä mahdollisimman lyhyttä sterilointiaikaa. EI SAA käsitellä autoklaavissa.

Rajoitettu takuu

Rajoitetun takuun jakso, siitä päivästä, jolloin tuote alun perin ostettiin: DRY FLOATATION®- ilmalla täytettävä kenno-osa: 36 kuukautta; Päällinen ja Vaahtotyyny: 18 kuukautta. Katso myös tuotteen mukana tullut ROHO Rajoitetun takuun täydennys tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

ROHO, Inc. kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tämän asiakirjan muuttamiseen. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteesta ROHO.com.

© 2013, 2016 ROHO, Inc.

ROHO®, DRY FLOATATION® ja AGILITY® ovat ROHO, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tässä asiakirjassa mainitut tuotteet saattavat olla yhden tai useamman patentin ja/tai tavaramerkin suojaamia Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta ROHO.com.



ROHO, Inc.

Pääkonttori:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

Posti-/lähetysosoite:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Yhdysvalloissa: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Paikallinen ROHO asiakaspalvelu/toimittaja cc@roho.com

Yhdysvaltojen ulkopuolella: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com

ROHO.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Item # T20203, Revision: 6/20/16



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.