

ROHO® AGILITY® Adapterplate for hodestøtter

AG-HR-BRKT



Dette dokumentet er ment som et tillegg til brukerhåndboken for ROHO AGILITY Ryggsystemer og erstatter IKKE informasjonen i den håndboken med mindre annet er angitt.

LEVERANDØR: Dette tillegget må gis til brukeren av dette produktet.

BRUKER: Før produktet tas i bruk, ber vi deg om å lese disse instruksjonene og lagre dem for fremtidig referanse.

BRUKSBESKRIVELSE

ROHO AGILITY Adapterbeslag for hodestøtter (hodestøtteadapter), er et valgfritt tilbehør som kan brukes for å feste hodestøtten på rullestolen til feste ROHO AGILITY Ryggsystemer (AGILITY).

ROHO, Inc. anbefaler at man forhører seg med for eksempel en lege eller fysioterapeut med erfaring i sittestillinger og posisjonering, for å avgjøre om hodestøtteadapter er riktig for den enkeltes sittebehov.

SIKKERHETSINFORMASJON



ADVARSLER

- IKKE monter en hodestøtteadapter på en AGILITY uten å ha lest og forstått denne brosjyren.. Trenger du ytterligere informasjon, ta kontakt med lege, ROHO-leverandøren eller ROHO, Inc.
- IKKE monter, demonter eller juster hodestøtteadapteren når en person sitter i stolen.
- Kontroller at hodestøtteadapteren sitter godt, og sjekk for slitasje og skader daglig. Etterstram evt. løse skruer og muttere ved å følge de vedlagte instruksjonene. IKKE fortsett å bruke hodestøtteadapteren hvis noen av delene ikke kan etterstrammes eller er ødelagte.

TRANSPORT I MOTORKJØRETØY




ADVARSEL: Om mulig, bør brukeren av AGILITY flyttes over i kjøretøyets originale bilsete og bruke kjøretøyets originale bilbelte.

AGILITY med "Quick Release" monteringsutstyr og hodestøtteadapter er dynamisk testet for bruk i et motorkjøretøy ved et uavhengig testanlegg. Tester ble utført i samsvar med standard RESNA WC-4:2012, del 20: *Wheelchair Seating Systems for Use in Motor Vehicles* som konkluderte at AGILITY med hodestøtteadapter oppfyller alle gjeldende kriterier for ryggstøtter i rullestoler i henhold til 5.1 av WC20.




ADVARSEL: AGILITY med en hodestøtteadapter må monteres på rullestolen på en riktig og sikker måte i samsvar med alle instruksjonene og advarslene som er oppført i denne brosjyren og i brukerhåndboken for AGILITY Ryggsystemer.


OPPLYSNINGER OM DELER - INNHOLD I PAKKEN

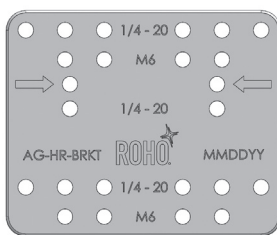

Hodestøtteadapter

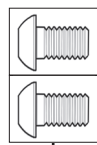

10 mm M6-1,0 bolter

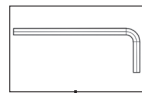

4 mm unbrakonøkkel

Bruksanvisnings-
tillegg

ROHO, Inc. har en policy om kontinuerlige produktforbedringer og forbeholder seg retten til å endre på dette dokumentet. Den til enhver tid gjeldende versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på permobilus.com.

© 2013, 2018 ROHO, Inc.

Følgende er varemerker og registrerte varemerker for ROHO, Inc.: ROHO® og AGILITY®.

Produktene i dette dokumentet kan være dekket av ett eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker. For ytterligere opplysninger henvises det til permobilus.com.




Intertek

The products featured in this document were manufactured under a Quality Management System that is certified to ISO 13485:2016.

PRODUKTSPEFISIKASJONER*

Materiale:	Svart anodisert aluminium	
Vekt:	0.13 kg (0.25 lbs.)	
Bredde x lengde x dybde:	89mm x 73mm x 8mm (3.5 tomme x 2.9 tomme x 0.3 tomme)	
Headrest Compatibility:	Compatible with OEM headrests that have the following center to center bolt spacing:	
	1/4-20 gjenger	M6 (1,0) gjenger
Vannrett:	1 tomme, 1-7/8 tommer, 2 tommer og 3 tommer	25,4 mm og 50,8 mm
Loddrett:	2 tommer	50,8 mm
* MERKNAD: Alle mål er omtrentlige.		



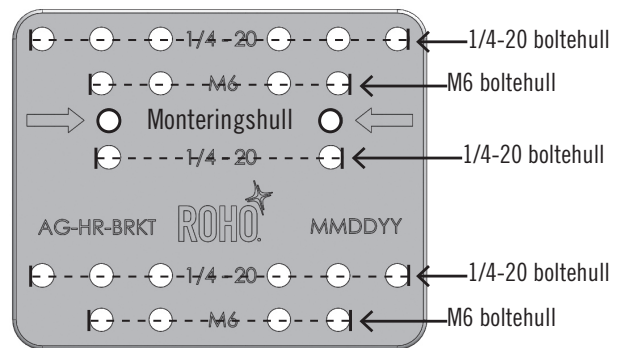


FESTE TIL HODESTØTTEADAPTER

1

Ta av AGILITY-trekket for å få tilgang til deforborede hullene. Etter at monteringen av hodestøttheadapteren er fullført, kan AGILITY-trekket tas på igjen.

Se brukerhåndboken for AGILITY Ryggssystemer i avsnittet om DEMONTERING OG MONTERING AV TREKK og TILLEGGSUTSTYR.

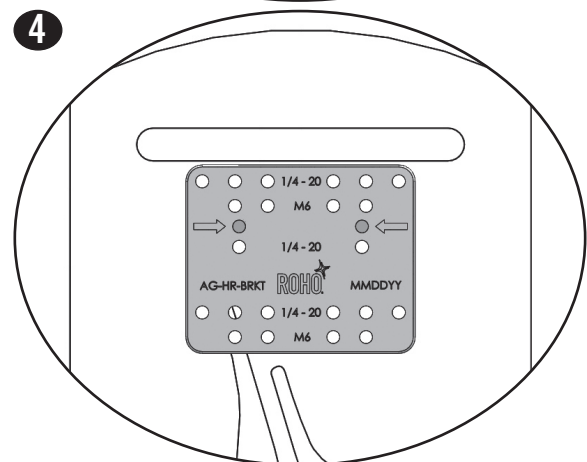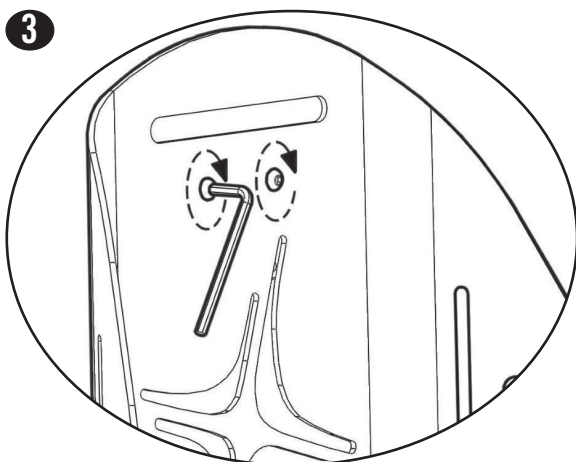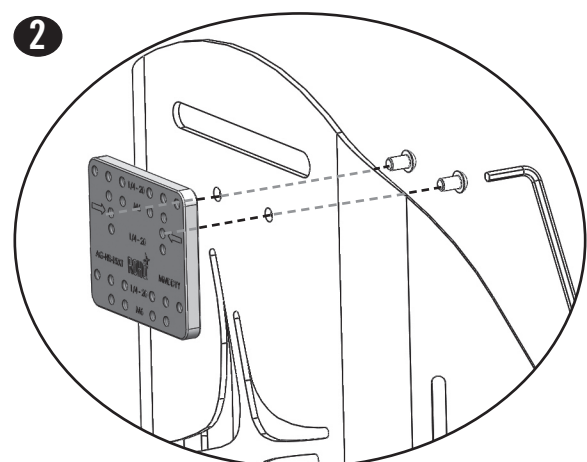

For detaljert informasjon om RENGJØRING OG DESINFISERING og BEGRENSET GARANTI for ryggplatebeslagene, se brukerhåndboken til AGILITY Ryggssystemer.

Produsert av ROHO, Inc.
Administrasjon: 100 Nord Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429, USA
Post-/leveringsadresse: 1501 Sør 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA
 permobilus.com
 USA: +1-800-851-3449 faks +1-888-551-3449 e-post: orders.roho@permobil.com
 Utenfor USA: +1-618-277-9150, Faks +1-618-277-6518 e-post: intlorders.roho@permobil.com

Item # T20222
 Rev. 2018-10-18